


Al mare o in piscina con il tuo microinfusore Promemoria per un corretto utilizzo

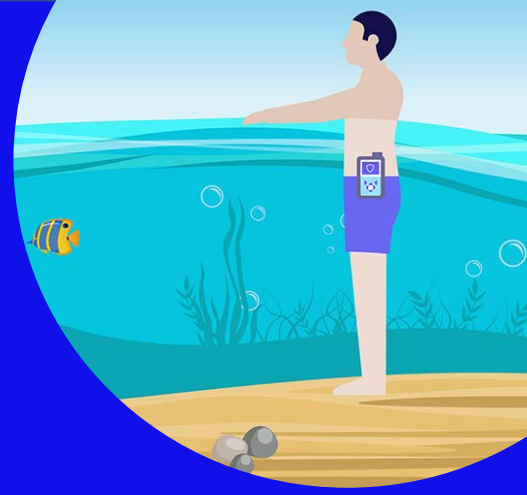

Al mare, in piscina o quando ti trovi per un po' di tempo lontano da casa, è molto importante prendere alcune precauzioni, per un corretto funzionamento del microinfusore. Ti ricordiamo che il microinfusore è impermeabile quando il serbatoio e il catetere sono inseriti correttamente, e fino ad una profondità di 3,6 metri (12 ft) per un massimo di 24 ore.

1


Prima di entrare in acqua, esamina attentamente il microinfusore. Togli custodie o altri accessori, se presenti, e verifica che l'involucro esterno di plastica dura sia integro. Se il microinfusore è caduto, ha colpito un oggetto duro, o è stato danneggiato in qualsiasi altro modo, l'impermeabilità dell'involucro esterno del microinfusore potrebbe essere stata compromessa.



Attenzione: Non è sempre facile individuare crepe o incrinature, a volte sono invisibili ad occhio nudo. Se sospetti che il microinfusore abbia subito un danno, o ti accorgi che sono presenti incrinature, non esporlo all'acqua. Contatta l'assistenza tecnica per accertare l'eventuale danno.


2

Assicurati che il tappo dello scomparto della batteria sia avvitato correttamente. Utilizzare il bordo inferiore della clip o una moneta per avvitare il tappo dello scomparto. Un avvitamento eccessivo del tappo può causare danni all'involucro del microinfusore. Un avvitamento insufficiente del tappo può impedire il riconoscimento della nuova batteria. Ruotare il tappo dello scomparto della batteria in senso orario fino a quando la scanalatura non è allineata orizzontalmente con il microinfusore, come illustrato nell'esempio sottostante.

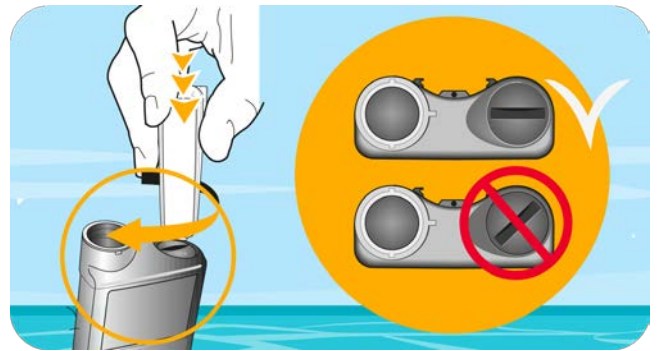

Dopo il bagno, controlla la glicemia se sospetti sia entrata dell'acqua nel microinfusore o osservi un altro malfunzionamento del microinfusore.

- Tratta la glicemia alta, se necessario, utilizzando una somministrazione alternativa di insulina prescritta dal tuo medico
- Rivolgiti al medico per gestire i livelli di glicemia alta o bassa o per qualsiasi altra domanda sulla terapia
- Rivolgiti al servizio di assistenza tecnica telefonica al **numero verde 800 60 11 22** per ulteriori informazioni sul dispositivo.

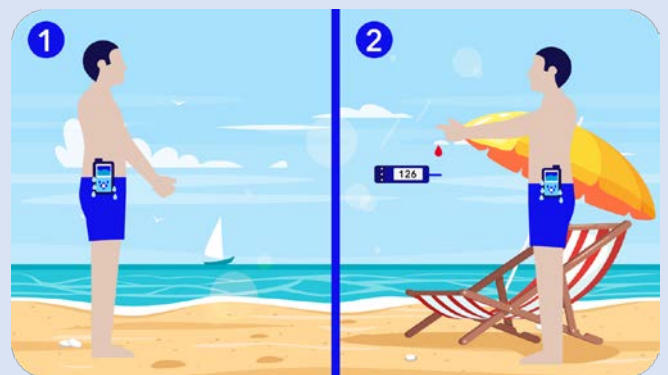

Tutti i contenuti di questa comunicazione sono ad uso esclusivamente informativo e in nessun caso devono sostituire la consultazione delle istruzioni per l'uso del dispositivo o il parere, la diagnosi o il trattamento prescritti dal medico. Consultarsi sempre con il proprio medico per informazioni relative a diagnosi e trattamenti ed attenersi scrupolosamente alle indicazioni del medico. Medtronic non può essere ritenuta responsabile in alcun modo per eventuali danni causati, o presumibilmente causati, direttamente o indirettamente, dalle informazioni contenute in questa comunicazione.

Tutti i diritti riservati. Medtronic, il logo Medtronic e Engineering the extraordinary sono marchi commerciali di Medtronic.™*

I marchi di terzi sono marchi commerciali dei rispettivi titolari. Tutti gli altri marchi sono marchi commerciali di una società Medtronic.

UC202302399 IT